

Estrazione e invio file dati AMD

ESTRAZIONE E INVIO FILE DATI AMD

Servizio di Assistenza:	Telefono	0735/782131
	Indirizzo mail	assistenza@meteda.it

 **Fabbricante:** METEDA S.r.l.

Sede Legale Via Antonio Bosio, 2 Int.10
00161 Roma

Sedi operative Via S. Pellico, 4; 63074 San Benedetto del Tronto
Via dell'Olmo, 1; 63074 San Benedetto del Tronto


Nome del Prodotto: Estrattore file dati AMD
Portale uploader dati AMD

STEP 1 – ESTRAZIONE FILE DATI AMD

Come primo passo, procedere con l'estrazione del file dati AMD, seguendo le istruzioni riportate di seguito.

Export File Dati AMD

Assicurarsi di eseguire il programma di export dal PC dove è installato il client di cartella clinica diabetologica MetaClinic. Una volta lanciato il programma dal proprio Desktop, il software mostrerà la schermata di login. Per accedere, l'utente dovrà inserire le stesse credenziali utilizzate per autenticarsi nella cartella informatizzata MetaClinic, avendo cura di selezionare il centro per il quale sono configurati i propri permessi.

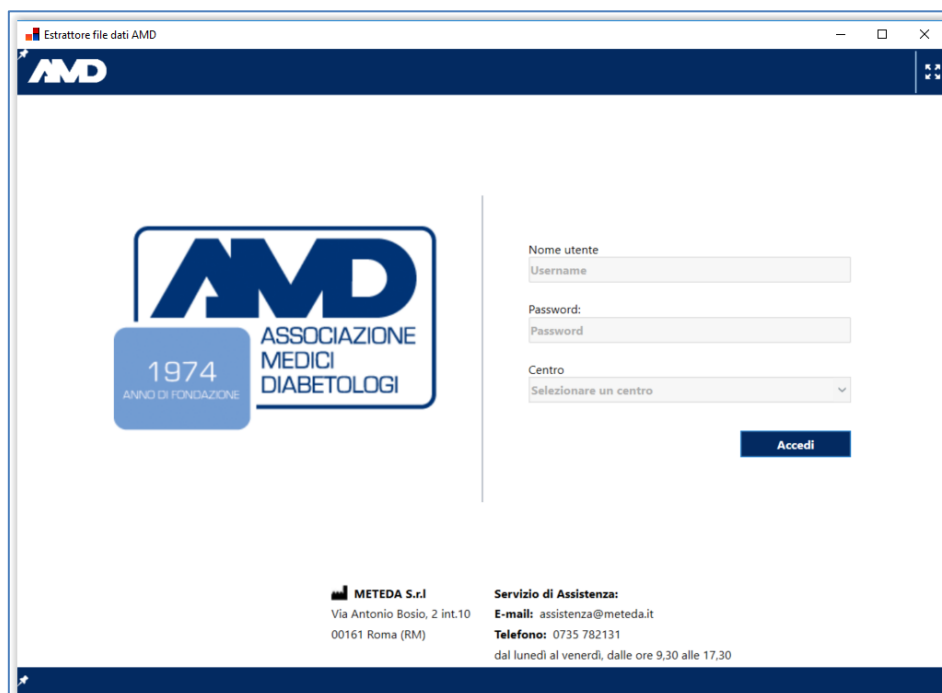

The screenshot shows a web application window titled "Estrattore file dati AMD". The interface features the AMD logo on the left, which includes the text "1974 ANNO DI FONDAZIONE" and "ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI". On the right, there is a login form with the following fields: "Nome utente" (containing "Username"), "Password:" (containing "Password"), and "Centro" (a dropdown menu with "Selezionare un centro"). Below these fields is a blue "Accedi" button. At the bottom of the window, there is contact information for METEDA S.r.l. and their assistance service.

METEDA S.r.l.
Via Antonio Bosio, 2 int.10
00161 Roma (RM)

Servizio di Assistenza:
E-mail: assistenza@meteda.it
Telefono: 0735 782131
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 17,30

È a questo punto possibile impostare quelli che sono i parametri che si intende applicare all'estrazione:

- Range temporale (da data - a data)

Estrattore file dati AMD

OPZIONI DI CREAZIONE DATI AMD

Impostare l'intervallo di date da considerare per l'estrazione

Dalla data: ☒
 Alla data: ☒

Per abilitare l'export dei dati AMD è necessario prima compilare il questionario sull'organizzazione del centro di Diabetologia

Compila il questionario

ESPORTA DATI AMD

Centro di riferimento: **Diabetologia**
 CodiceAMD: **1234567**
 Utente: **diabetologia**
 Percorso del file:

GENERA FILE DATI AMD

diabetologia - Diabetologia

Una volta definiti i criteri di cui sopra, per abilitare la generazione dell'export è necessario che l'utente compili il questionario sull'organizzazione del centro di Diabetologia. Per fare ciò, cliccare sul tasto "Compila il questionario". Si aprirà una finestra contenente i quesiti a cui rispondere, divisi in tre dimensioni organizzative (Dati del centro, Personale e Attività).

Compila il questionario

Dati del centro

Tipo di struttura:

Numero di sedi della struttura:

Day Hospital:

Posti letto della struttura dedicati al soggetto con diabete:

Posti letto in appoggio in altre strutture non esclusivi per soggetti con diabete:

Vengono effettuate consulenze a ricoverati in altri reparti sanitari:

Personale

Attività

Salva

⬅ Personale

Per compilare correttamente questa sezione del questionario, è necessario riportare il numero di tutti i componenti del team diabetologico, a prescindere dal tipo di contratto, (dipendenti o SUMAI) e la somma di tutte le ore settimanali di attività di tutte le figure professionali impiegate nel servizio.

Medico:

Numero di medici a tempo pieno

Numero di medici a tempo parziale (part time)

Numero di medici con rapporto lavorativo diverso (borsisti, specializzandi, altri contratti)

Numero di medici specialisti territoriali

Numero totale di ore settimanali di attività diabetologica svolta dai medici

Specificare data di nascita e sesso dei medici:

+	Medico	Anno di nascita	Sesso
🗑	zzzz	02-Jul-75	📅

Infermieristico:

Numero di infermieri dedicati esclusivamente alla diabetologia:

Numero di infermieri con attività solo parzialmente svolta in diabetologia:

Numero totale di ore settimanali di attività diabetologica svolta dagli infermieri:

Altro personale professionale:

Dietista

Podologo

Psicologo

Altro

⬅ Attività

Su quante ore settimanali totali si articola l'attività diabetologia del servizio?

Su quanti giorni alla settimana si articola l'attività diabetologica del servizio?

Numero degli abitanti del territorio su cui lavora il centro di diabetologia?

Ambulatori dedicati attivi anche on demand:

Diabete tipo 1

Piede

Disfunzione erettile

Diabete e gravidanza

Neuropatia

Retinopatia

Nefropatia

Gruppi educativi almeno due volte al mese:

Gruppi diabete tipo 1

Gruppi diabete tipo 2

Counting carboidrati

Uso delle tecnologie:

Da quanti anni è in uso una cartella clinica informatizzata?

Terminata la compilazione del questionario, cliccare su Salva per Salvare i dati inseriti. Il tasto “Compila il questionario” si colorerà di verde ad indicare che il questionario è stato completato. Sarà ora possibile procedere con la creazione del file dati cliccando sul tasto “GENERA FILE DATI AMD”.


La procedura di export si avvierà e verrà mostrata una barra di progresso in cui sarà visibile la percentuale di completamento.

IMPORTANTE: Si prega di fare attenzione alle istruzioni che il programma mostrerà a video sotto la barra di progresso.


The screenshot shows a window titled "Estrattore file dati AMD". It has a dark blue header with the AMD logo. Below the header, there are two main sections. The first section, "OPZIONI DI CREAZIONE DATI AMD", contains a heading "Impostare l'intervallo di date da considerare per l'estrazione" and two date pickers: "Dalla data: 01/01/2025" and "Alla data: 31/12/2025". Below these is a note: "Per abilitare l'export dei dati AMD è necessario prima compilare il questionario sull'organizzazione del centro di Diabetologia". The second section, "ESPORTA DATI AMD", displays the following information: "Centro di riferimento: Diabetologia", "CodiceAMD: 12345678", "Utente: diabetologia", and "Percorso del file:". Below this is a button labeled "GENERA FILE DATI AMD". Under the button is a progress bar labeled "Progresso esportazione:" which is filled with green and shows "20,0%". Below the progress bar is an "Annulla" button. At the bottom of the window, there is a small text block: "L'estrazione potrebbe richiedere del tempo. Si prega di non chiudere la finestra e di non spegnere il PC fintanto che l'estrazione non sarà terminata. Cliccando su Annulla l'export verrà interrotto." The bottom right corner of the window shows a status bar with the text "diabetologia - Diabetologia".

La creazione del file dati potrebbe richiedere parecchio tempo, pertanto si raccomanda di non chiudere la finestra del programma di Esportazione file dati AMD e non spegnere il PC fintanto che l'estrazione non sia completata, in quanto il processo di esportazione si arresterebbe.

Ad estrazione completata, si aprirà automaticamente un pop-up dove sarà possibile selezionare la directory di salvataggio dell'Export effettuato.

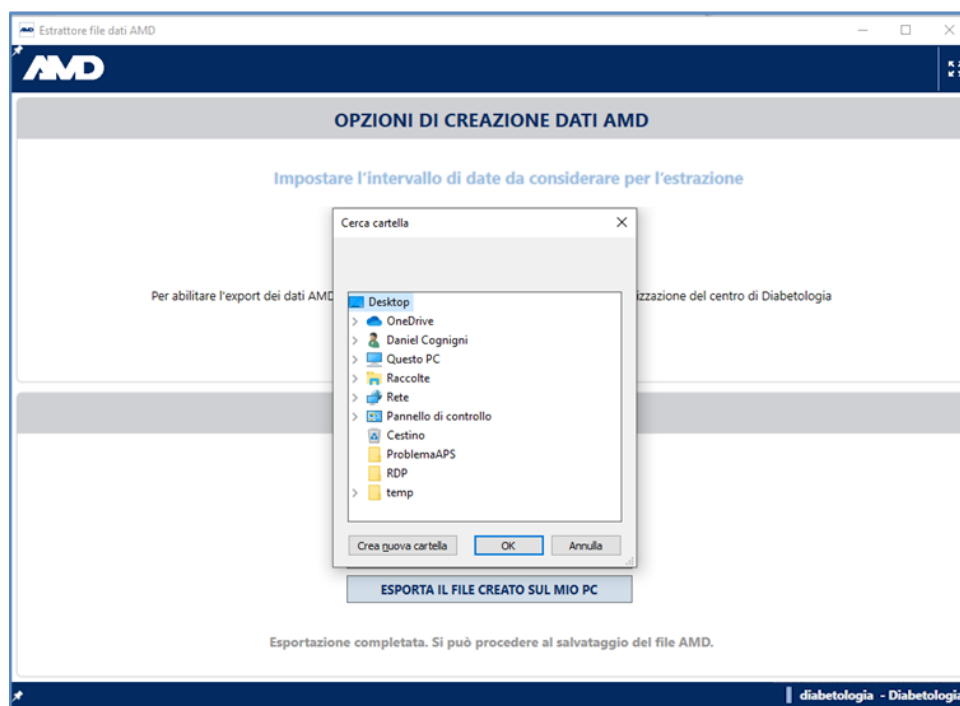

Alternativamente, sarà possibile effettuare il salvataggio dell'esportazione in qualsiasi momento successivo al termine dell'export, cliccando sul tasto "ESPORTA IL FILE CREATO SUL MIO PC".

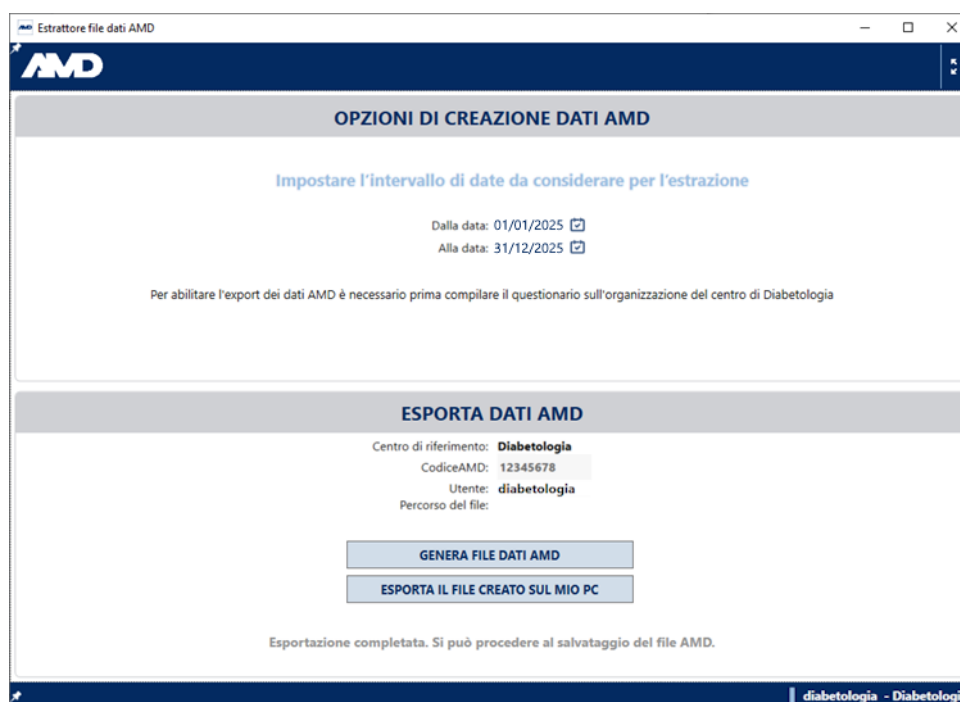

Requisiti minimi di sistema

- Microsoft .NET Framework 4.0 o successivi
- Spazio su disco sufficiente a contenere l'export del file dati AMD (> 1 GB)
- MetaClinic - versione client-server 10.8 (installato sul PC ed eseguito almeno una volta)
- oppure*
- MetaClinic - versione 10.9 (installato sul PC ed eseguito almeno una volta)

STEP 2 – CARICAMENTO SUL PORTALE AMD

Una volta terminata la creazione del file dati AMD, seguire le istruzioni di seguito riportate per procedere con l'upload del file sul portale annali AMD.

Richiesta credenziali Portale Annali AMD

Qualora non si disponga già di un'utenza per accedere al portale di raccolta File Dati AMD, per potersi abilitare al caricamento di un file dati sul portale annali, è necessario richiedere l'attivazione di un account compilando il form di iscrizione disponibile nella pagina di login del sito web

<https://portaleannali.aemmedi.it/>.

PORTALE UPLOADER FILE DATI

EFFETTUA L'ACCESSO AL PORTALE

E-MAIL UTENTE

PASSWORD

entra

[Password dimenticata?](#)

Se non sei ancora registrato, procedi all'attivazione di un account compilando il form che trovi qui.

Si prega di specificare l'indirizzo e-mail dell'utente che effettuerà il caricamento del file dati AMD sul Portale.

Per garantire la massima sicurezza, la generazione delle credenziali non avverrà in maniera automatica.

Un operatore autorizzato prenderà in carico la sua richiesta, pertanto il processo potrebbe richiedere diverse ore.


Riceverà una e-mail all'indirizzo specificato una volta completata l'operazione.

ATTENZIONE: Nel caso non dovete ricevere l'e-mail di conferma di registrazione al portale entro un giorno, controllate che l'e-mail non sia stata erroneamente archiviata come SPAM.

AMD
ASSOCIAZIONE
MEDICI
DIABETOLOGI
1974
ANNI DI FORMAZIONE

È importante che nel form si specifichi l'indirizzo e-mail dell'utente che andrà poi ad effettuare il caricamento del file dati AMD sul Portale. Per garantire la massima sicurezza, la generazione delle credenziali non avverrà in maniera automatica ma verrà presa in carico da un operatore autorizzato, pertanto il processo potrebbe richiedere tempo.

Una volta che verrà completata l'operazione, il richiedente riceverà una e-mail con le istruzioni di attivazione all'indirizzo specificato nel form.

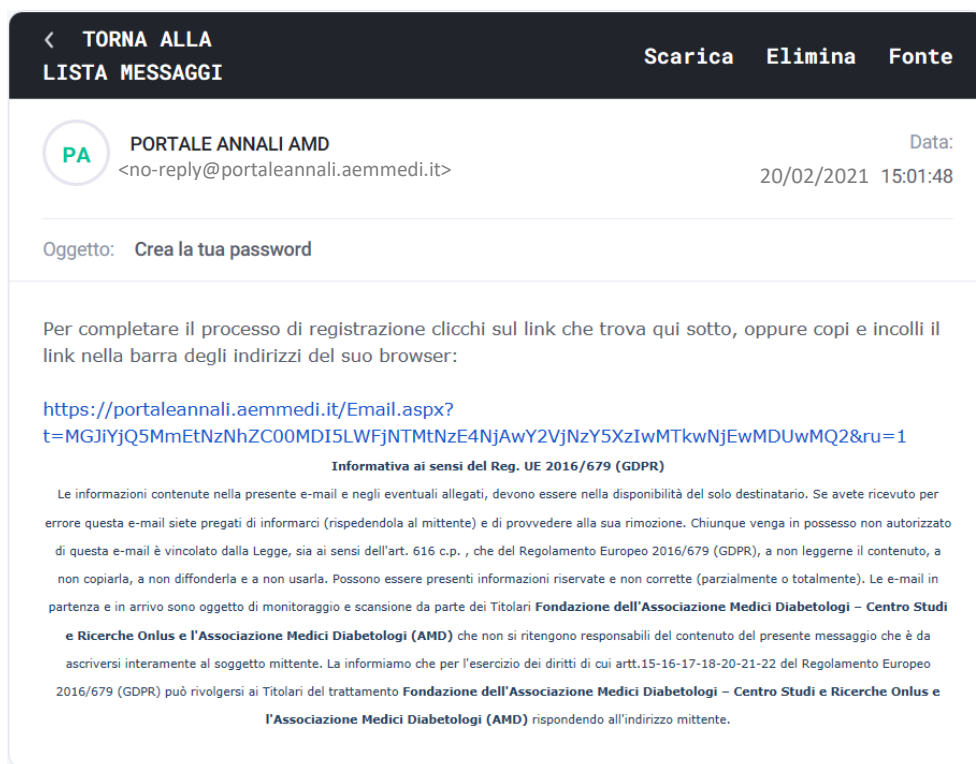

Cliccando sul link di attivazione, si verrà reindirizzati al portale AMD dove l'utente potrà impostare e confermare la propria password che dovrà utilizzare anche per accessi futuri.

PORTALE UPLOADER FILE DATI

INSERISCI E CONFERMA LA PASSWORD DA UTILIZZARE PER ACCEDERE AL PORTALE

PASSWORD

CONFERMA PASSWORD

conferma registrazione

La password deve essere di almeno 8 caratteri, deve contenere almeno un numero e un carattere speciale tra questi !@#%*&*


AMD
ASSOCIAZIONE
MEDICI
DIABETOLOGI
1974
ANNO DI FONDAZIONE

Una volta inserita e confermata la password che si intende utilizzare, cliccare su “conferma registrazione”.

IMPORTANTE: La password deve essere di almeno 8 caratteri, deve contenere almeno un numero e un carattere speciale tra i seguenti: !@#%*&*

Creazione e salvataggio del file dati AMD


Ora che si è attivata la propria utenza sul portale annali, sarà possibile richiedere un codice che dovrà essere utilizzato per effettuare il caricamento del file dati AMD sul portale. Per richiedere un codice cliccare sul tasto “Richiedi codice”

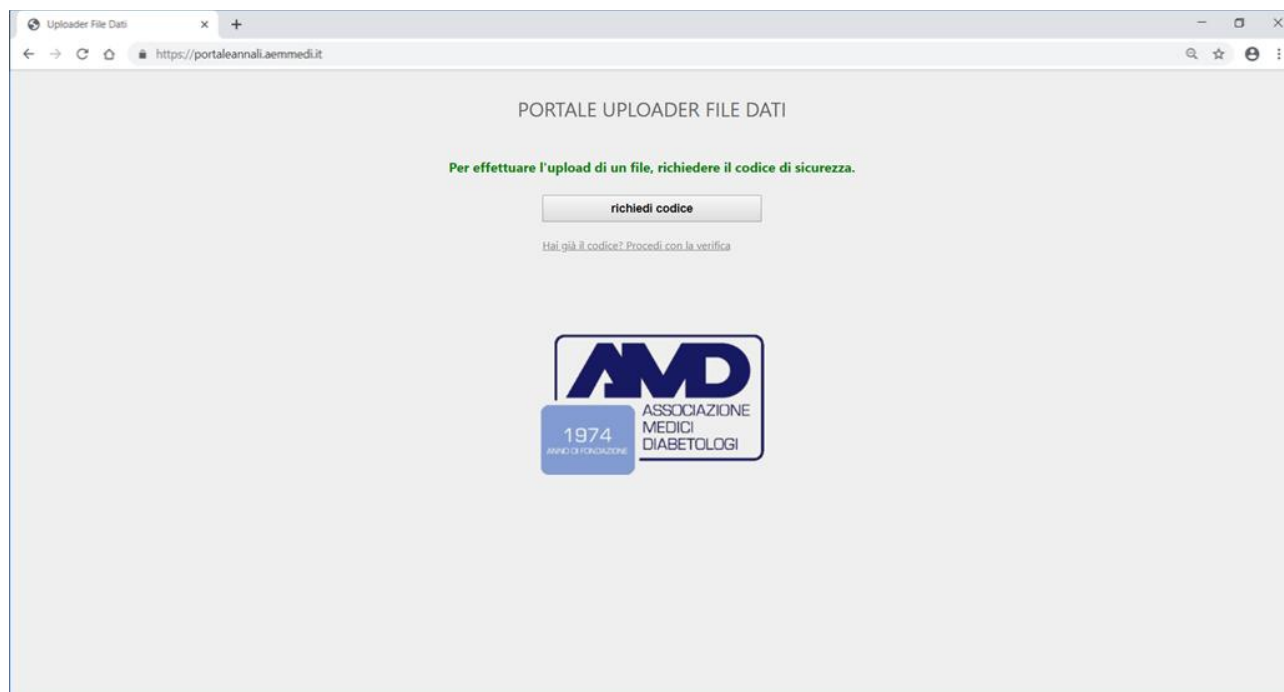


L'utente riceverà all'indirizzo mail specificato in fase di attivazione, un messaggio contenente il codice generato dal portale.




Copiare e incollare il codice ricevuto via mail sulla pagina del portale e cliccare su “Verifica codice”

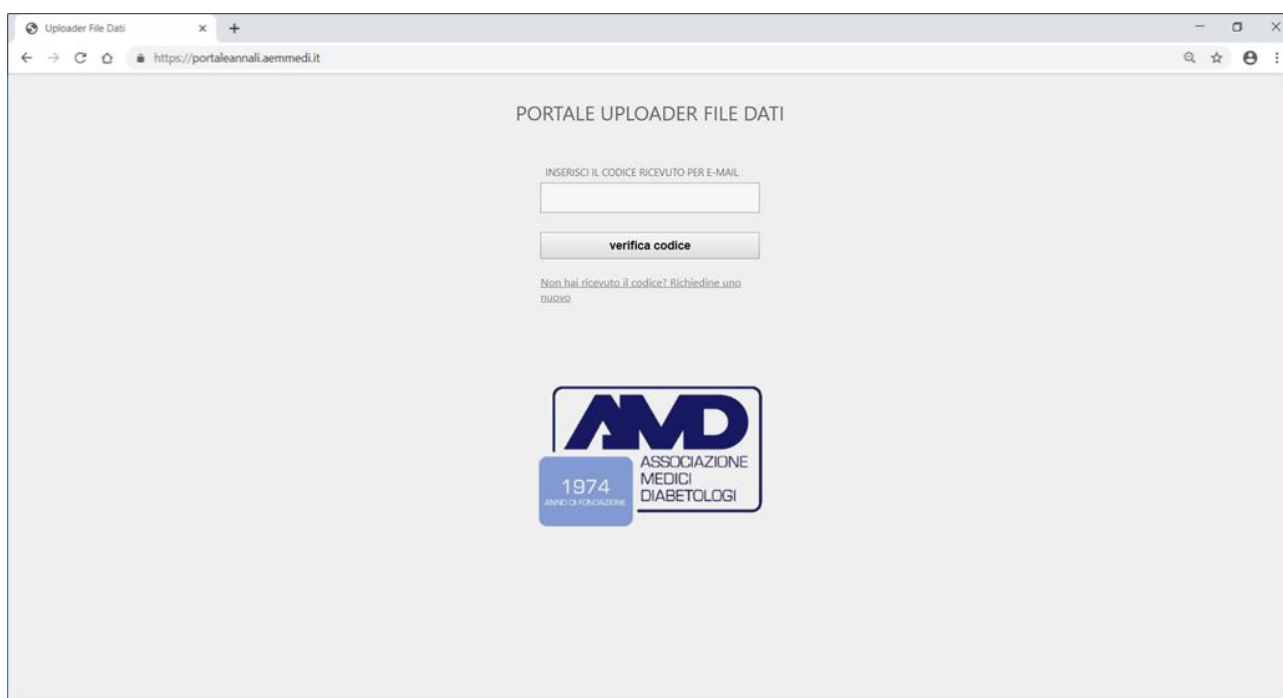


Se il codice inserito è corretto, si avrà accesso alla pagina di caricamento del file. È possibile caricare un file, trascinandolo all'interno del perimetro tratteggiato nella pagina del portale sul browser oppure ricercare e selezionare un file da una directory di propria scelta cliccando sul link sottolineato selezionalo dal tuo computer.

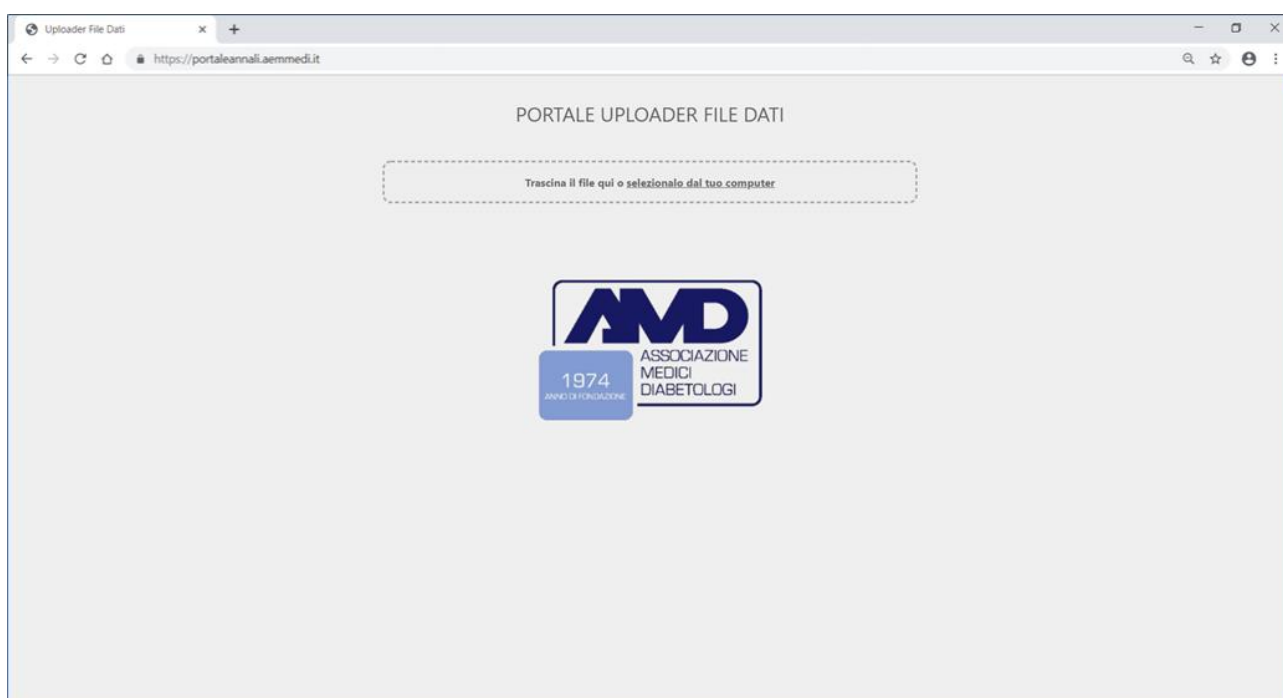

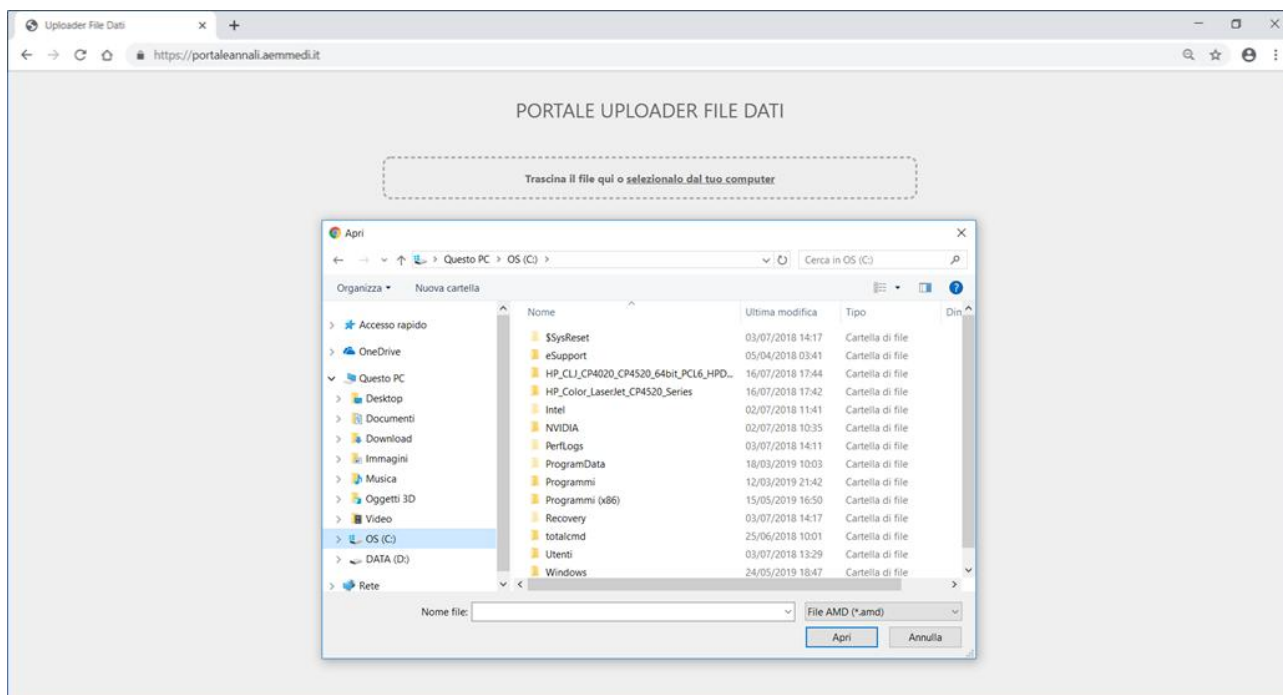


Una volta selezionato il file, inizierà la procedura di caricamento sul portale.


IMPORTANTE: Il caricamento potrebbe richiedere del tempo. Si raccomanda di non chiudere il browser finché l'operazione non sarà completata con successo.

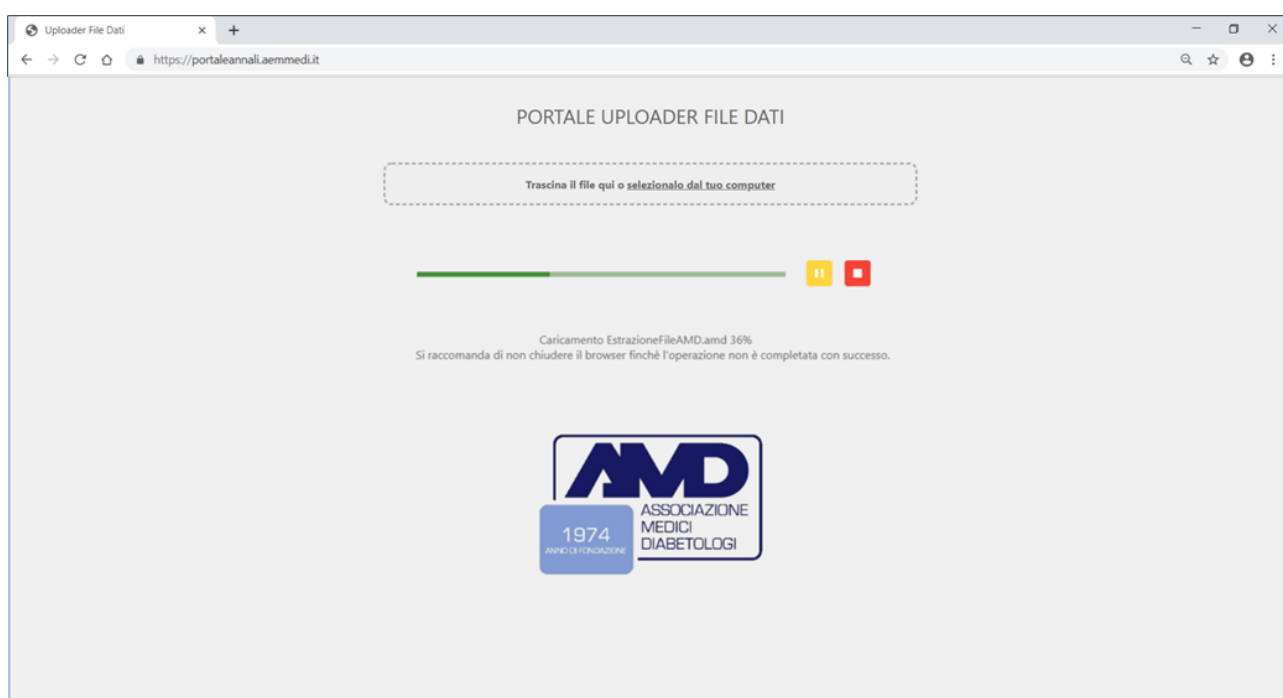

Terminata la procedura di caricamento, si visualizzeranno i dati relativi ai criteri di selezione del centro caricato.

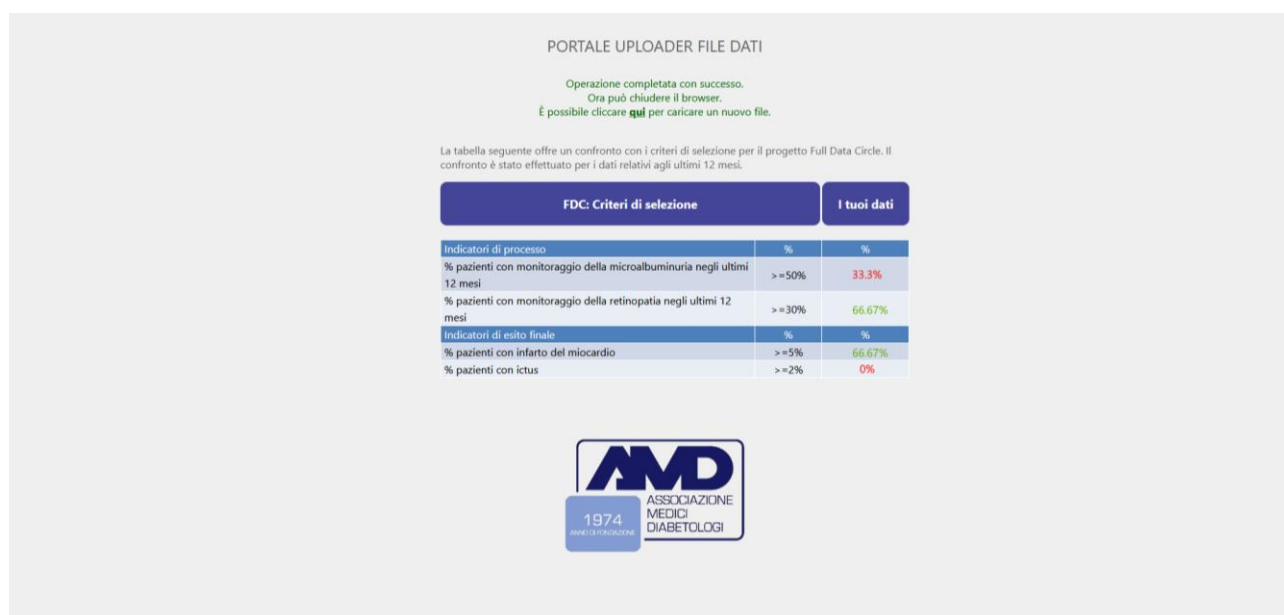

L'utente riceverà anche una mail con il risultato mostrato a video e l'esito sulla partecipazione al progetto.

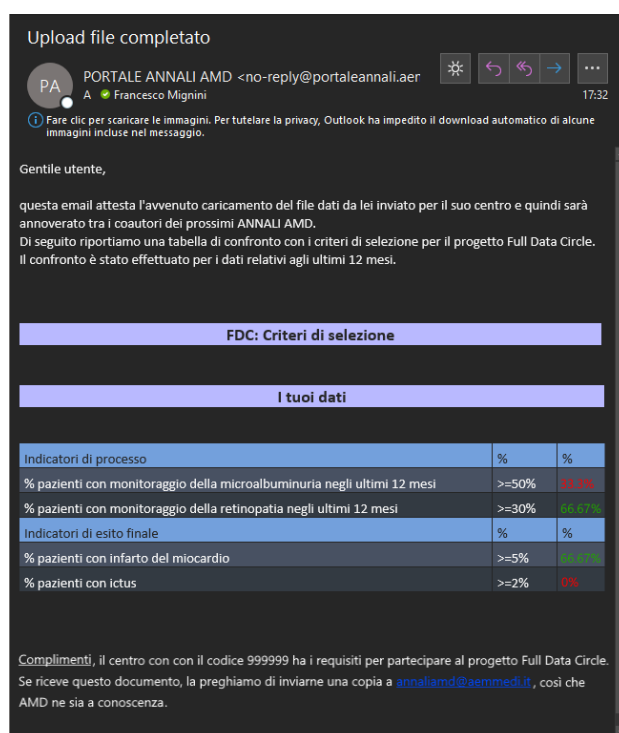

Requisiti minimi di sistema

I browser supportati sono:

Chrome 11+

Internet Explorer 11

Mozilla Firefox 4+

Microsoft Edge 12+